

Flexible. Configurable. Simple.

Una Solución completa para laboratorios que requieren Agua Tipo I

El PURELAB Chorus 1 proporciona una solución completa para el agua ultra pura, capaz de ser alimentado desde la red de agua potable, ideal para laboratorios que requieren más de 100 litros por día con calidad de 18.2 MΩ-cm de agua ultrapura. Con este diseño simple, ergonómico y de fácil uso, el agua puede ser dispensada directamente del sistema o desde la opción adicional del dispensador Halo.

Recirculación Completa

Recirculación del agua purificada a través de nuestro reservorio modular para mantener calidad de agua constante de 18.2 MΩ-cm en todo momento.

Biofiltro ELGA (opcional)

Cuando esta instalado en el sistema PURELAB Chorus 1 complete, produce agua libre de impurezas biológicamente activas.

Solución de sistema Único

Solución de Sistema único, perfecto para aplicaciones analíticas y ciencias de la vida que requieren una calidad de Agua Tipo 1.

Fácil Acceso

Arreglo con puertas frontales que provee un rápido y fácil acceso para el cambio de consumibles.

Diseño para ahorro de espacio

Diseñado para ser modular y apilable y así ahorrar espacio en su laboratorio, puede ser montado en la pared o en una mesa de trabajo.



Complete


Captura de Datos

Captura de datos vía USB del desempeño del sistema y actualización de software.

Soluciones Dispensadoras Halo

Opciones: Básico, Avanzado o Flexible

Flujo de Proceso PURELAB Chorus 1 Complete

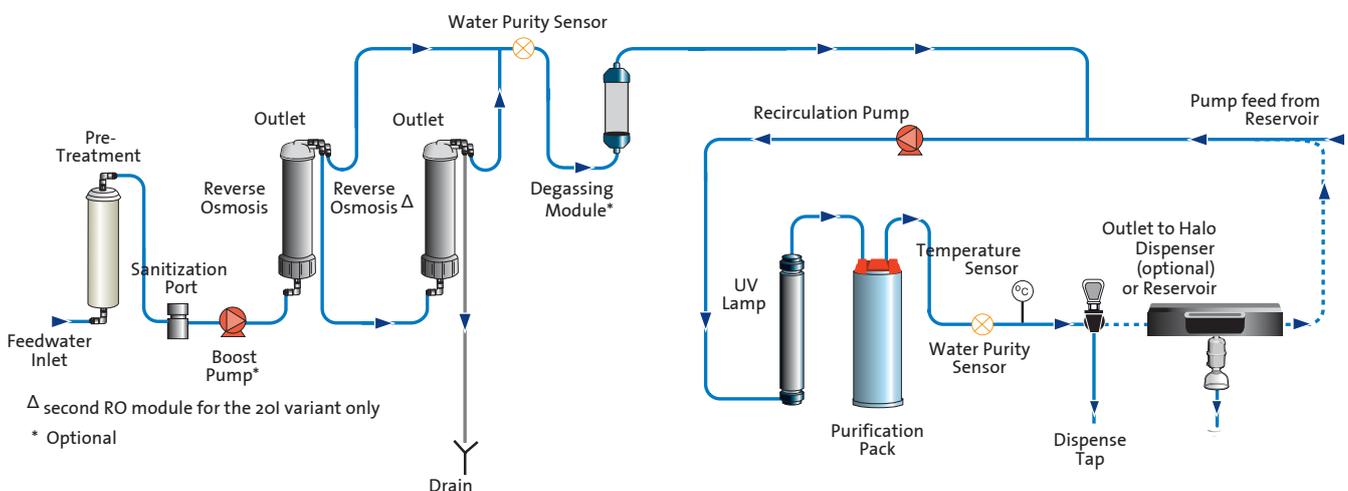

Aplicaciones:

- ✓ Espectrometría de Masas
- ✓ Inmunoquímica
- ✓ Espectrometría Atómica
- ✓ Cromatografía Líquida
- ✓ Eletroquímica
- ✓ Laboratorio General
- ✓ Biología Molecular
- ✓ Espectrofotometría